


Comment utiliser votre inhalateur Ellipta

1. Sortez l'emballage d'aluminium de la boîte.
2. Ouvrez l'emballage d'aluminium et retirez l'inhalateur Ellipta.



3. Tenez l'inhalateur bien droit.
4. Faire glisser le couvercle vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».
5. **Le médicament est maintenant prêt.**

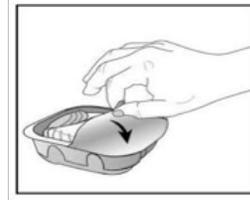

6. Inclinez légèrement la tête vers l'arrière et tenez-vous droit en position assise.
7. Expirez sans mettre votre bouche sur l'appareil.



8. Refermez vos lèvres fermement autour de l'embout buccal.
9. **Ne bloquez pas la grille d'aération avec vos doigts.**
10. Inspirez lentement et profondément.
11. Retenez votre respiration pendant au plus 10 secondes.



12. Essuyez l'embout buccal à l'aide d'un chiffon sec.
13. Glissez le couvercle vers le haut pour le fermer jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».
14. Ensuite, rincez-vous la bouche en gargarisant, et crachez.



15. L'indicateur de doses sur le devant de l'appareil précisera le nombre de doses qui y reste. L'indicateur montrera 0 lorsqu'il est vide.
16. Entreposez le dispositif dans un endroit frais et sec.